

EINFACH.
BESSER.
SEHEN.




WELLNESS FÜR TROCKENE AUGEN

MIT DER ACTIVA WÄRME-
UND MASSAGEBRILLE

 DAO

Symptome

Trockene Augen verursachen häufig ein Spannungsgefühl und geschwollene Augenlider. Betroffene klagen oft über brennende, gerötete oder tränende Augen, was im Alltag zu Einschränkungen führen kann – etwa beim Arbeiten am Bildschirm, Autofahren, Lesen oder dem Tragen von Kontaktlinsen. Um diese Beschwerden langfristig zu reduzieren, empfiehlt sich eine regelmäßige thermisch-mechanische Anwendung an den Augenlidern.

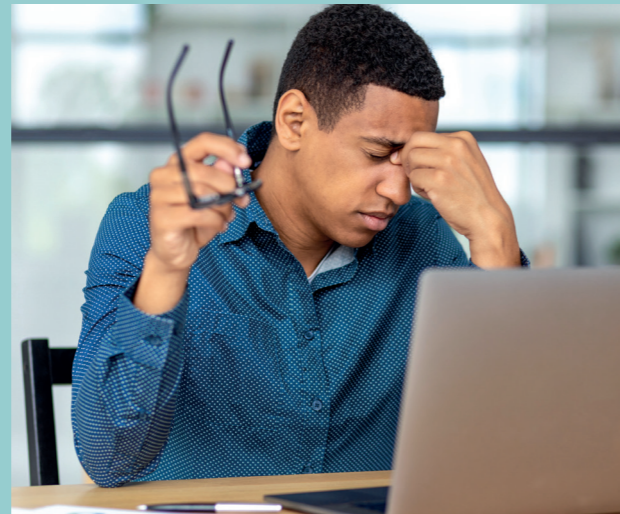

Abhilfe

Dank der Activa Wärme- und Massagebrille kannst du schnell und langanhaltend den Augenkomfort deiner Kunden steigern. Die Thermo-Puls-Technologie nutzt kontrollierte Wärme und vollautomatische Massage, dadurch können Verkrustungen gelöst, Schwellungen und Rötungen verringert und das Wohlbefinden wiederhergestellt werden. Eine Anwendung dauert lediglich 15 Minuten. Um eine langfristige Verbesserung zu erreichen, sind mehrere Sitzungen notwendig.

Aufbau

DIE BRILLE

- Bequeme Silikonauflagen
- Einfach zu desinfizieren
- Einstellbares Kopfband



DIE BEDIENEINHEIT

- Benutzerfreundlich
- Automatischer Timer
- Temperaturkontrolle auf 42 °C

DAS FUNKTIONSPRINZIP

- 5 Minuten reine Wärme
- 10 Minuten Wärme und Massage
- Vollautomatische Anwendung



Potenziale

ALLEINSTELLUNGSMERKMAL



Biete deinen Kunden ein einzigartiges Wellness-Erlebnis, das Wärme- und Massageanwendungen in einer effektiven Sitzung vereint.

GESTEIGERTE KUNDENZUFRIEDENHEIT

Steigere das Wohlbefinden und die Zufriedenheit deiner Kunden mit der Activa Anwendung.



NEUKUNDENGWINNUNG DURCH WEITEREMPFEHLUNG

Du wirst vertrauensvoller Ansprechpartner und kannst die steigende Nachfrage nach Gesundheitsleistungen bedienen. Zufriedene Kunden werden dein Angebot weiterempfehlen.



VERKÜRZTE WIEDERBESUCHSZEITEN

Du empfangst deine Kunden häufiger und pflegst so einen noch besseren Kundenkontakt.



ZUSÄTZLICHE UMSÄTZE DURCH REGELMÄSSIGE SITZUNGEN



Durch regelmäßige Sitzungen sorgt die Activa Wärme- und Massagebrille für zusätzliche Umsätze.

Eigenschaften



Anwendung

IDEAL BEI KUNDEN MIT:

Lipidschichtdicke < 80 nm

NIK BUT < 10 Sekunden

Meibographie

Weniger als 80 %
Verlust

Es wird empfohlen, eine liegende Position einzunehmen, um den Komfort der Sitzung zu erhöhen und die Brille in Position zu halten.

1.

2.

Die Brille aufsetzen und über die Bänder anpassen. Der Druck auf den Augen sollte möglichst gering sein

Auf der Bedieneinheit „Start“ drücken, um die Sitzung zu beginnen.

3.

4.

Die verbleibende Anwendungszeit dem Bildschirm entnehmen.

Die Sitzung kann jederzeit über die „Stop“-Taste beendet werden.

5.


6.

Nach 15 Minuten endet die Anwendung automatisch.

i Alle Auffälligkeiten können mit den Untersuchungstechniken des Topographen SBM OS1000 festgestellt werden.

So profitierst du davon:

- i** In einem Jahr werden 10 Sitzungen pro Kunde empfohlen, im Beispiel zum Gesamtpreis von 299€.
- In der Beispielrechnung sind bereits ab 36 Kunden die Anschaffungskosten gedeckt.

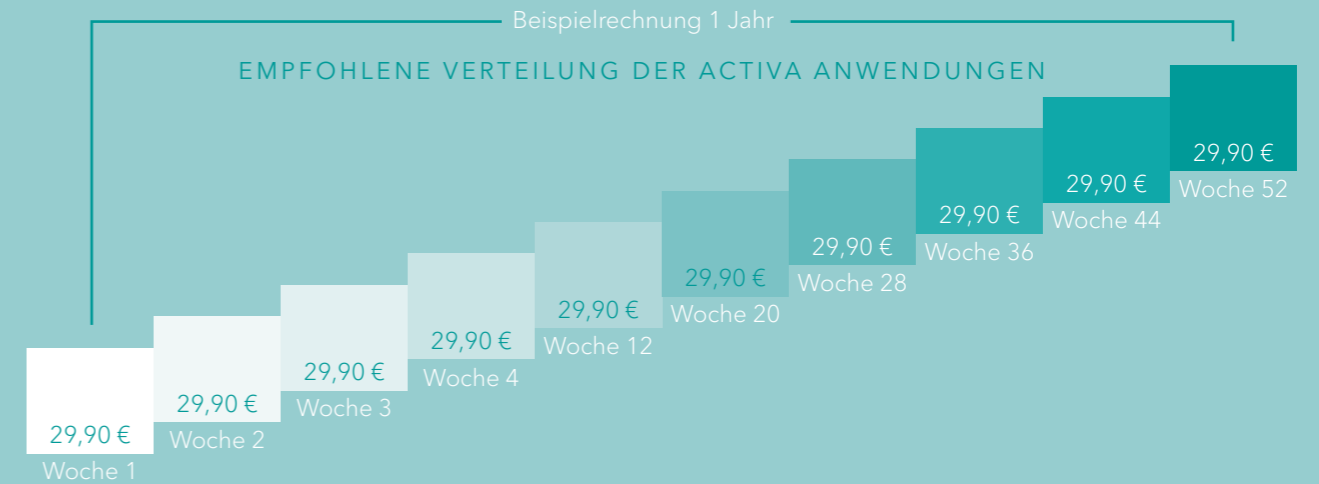

Wird nicht empfohlen bei:

- Aktiver Augenentzündung
- Augenoperationen am selben Tag
- Risiko einer Netzhautablösung
- Fehlstellungen der Augenlider
- Verwendung von entzündungshemmenden Augentropfen im letzten Monat

Wartezeit nach Augenoperationen:

Katarakt	7 Tage
Lasik	1 Monat
PRK	10 Tage
Blepharoplastik	1 Monat

Noch Fragen?

Kontaktiere unsere Kundenberater für Brillenglas und Instrumente oder schreibe an mail@dao-ag.de

Christian Schiemann

T +49 (0) 151 - 4188 4718

E christian.schiemann@dao-ag.de

PLZ 26|32-33|44|46|48-49|57|59

Philipp Müller

T +49 (0) 151 - 2218 9943

E philipp.mueller@dao-ag.de

PLZ 18-25|27-29|30-31|37-38

Ralf Tillmann

T +49 (0) 160 - 9080 6298

E ralf.tillmann@dao-ag.de

PLZ 40-42|45|47|50-54|58

Ron Konietzko

T +49 (0) 163 - 2122 126

E ron.konietzko@dao-ag.de

PLZ 01-06|09-17|39|99

Kai Weinberg

T +49 (0) 178 - 3457 013

E kai.weinberg@dao-ag.de

PLZ 34-36|55-56|60-65|97-98

Sebastian Schrod

T +49 (0) 151 - 2614 1173

E sebastian.schrod@dao-ag.de

PLZ 07-08|90-96|730-733|735-739
840-843|850-852

Ioannis Dalamitros

T +49 (0) 163 - 2122 124

E ioannis.dalamitros@dao-ag.de

PLZ 66-69|70-72|75-79|740-749

Susanne Endlich

T +49 (0) 173 - 5795 993

E susanne.endlich@dao-ag.de

PLZ 80-83|86-89
734|844-845|853-859

